

CHARLY

Das Prinzip Vorsprung

# Anleitung

## Virens Scanner-Konfiguration

Stand: 15.08.2012

# Inhalt

<b>Tipps zur Virens Scanner-Konfiguration</b>	<b>3</b>
<b>1. Konfiguration des Virens Scanners beim Einsatz der Datenbank PostgreSQL</b>	<b>3</b>
1.1. Ausschluss von Verzeichnissen	3
1.2. Ausschluss von Prozessen	3
<b>2. Konfiguration des Virens Scanners beim Einsatz der Datenbank Primebase</b>	<b>5</b>
2.1. Ausschluss von Verzeichnissen	5
2.2. Ausschluss von Prozessen	5

## Tipps zur Virens Scanner-Konfiguration

- > Der Virens Scanner muss **vor** der Installation von CHARLY deaktiviert werden.
- > **Nach** der Installation ist es zwingend notwendig, den Virens Scanner zu konfigurieren.
- > Je nach eingesetzter Datenbank ist die Konfiguration des Virens Scanners unterschiedlich.



Um herauszufinden welche Datenbank Sie einsetzen, gehen Sie bitte in CHARLY in er Menüleiste auf »Hilfe« »SQL-Datenbank«. Dort wird Ihnen angezeigt, welche Datenbankversion Sie einsetzen.

## 1. Konfiguration des Virens Scanners beim Einsatz der Datenbank PostgreSQL

### 1.1. Ausschluss von Verzeichnissen

Bitte geben Sie in Ihrem Virens Scanner folgende Ausschlüsse ein:

Im Beispiel wird die Installation auf Laufwerk C:\ durchgeführt und als Servername „server“ verwendet. Bitte ändern Sie bei abweichendem Installationsort den Laufwerksbuchstaben ab und ersetzen den Servernamen durch Ihren realen Servernamen.

#### An den Arbeitsplätzen:

1. Ordner "C:\Solutio"
2. Laufwerk "S:\"
3. UNC-Pfad „\\server\Charly“

#### Am Server:

1. Ordner "C:\Solutio"
2. Laufwerk "S:\"
3. UNC-Pfad „\\server\Charly“

### 1.2. Ausschluss von Prozessen

Bei verschiedenen Virens Scannern können auch Prozesse ausgeschlossen werden. Falls dies bei Ihrem Virens Scanner möglich ist, erstellen Sie bitte folgende Ausnahmen für folgende Prozesse:

**Auf Ihrem CHARLY-Server:**

```

> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\System\machd.exe
> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\System\nmserver.exe
> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\System\WindowServer.exe
> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\Frameworks\AppKit.framework\Resources\
  pbs.exe
> \Solutio\Client\Charly\Solutio.app\solutio.exe
> \Solutio\Server\PostgreSQL\bin\pg_ctl.exe
> \Solutio\Server\Glassfish\lib\appservService.exe

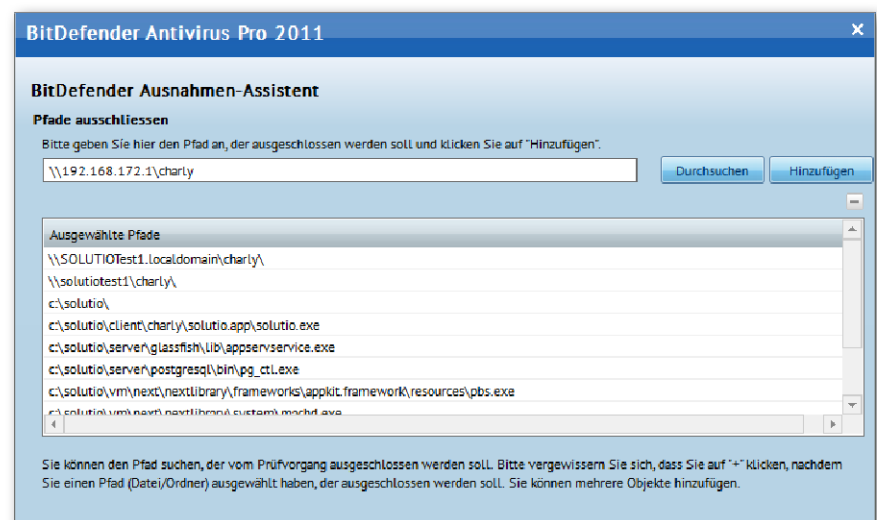
```

**Auf jedem CHARLY-Client:**

```

> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\System\machd.exe
> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\System\nmserver.exe
> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\System\WindowServer.exe
> \Solutio\VM\NeXT\NextLibrary\Frameworks\AppKit.framework\Resources\
  pbs.exe
> \Solutio.app\solutio.exe

```

**Beispiel für die Konfiguration von BitDefender Antivirus Pro 2011**

## 2. Konfiguration des Virens Scanner beim Einsatz der Datenbank Primebase

### 2.1. Ausschluss von Verzeichnissen

Bitte geben Sie in Ihrem Virens Scanner folgende Ausschlüsse ein:

Im Beispiel wird hier die Installation auf Laufwerk C:\ durchgeführt und als Servername „server“ verwendet. Bitte ändern Sie bei abweichendem Installationsort den Laufwerksbuchstaben ab und ersetzen den Servernamen durch Ihren realen Servernamen.

#### An den Arbeitsplätzen:

1. Ordner "C:\Next"
2. Laufwerk "S:\"
3. UNC-Pfad "\\server\Solutio"

#### Konfiguration am Server:

1. Ordner "C:\Solutio"
2. Ordner "C:\Primebase"
3. Ordner "C:\Next"
4. Laufwerk "S:\"
5. UNC-Pfad "\\server\Solutio"

### 2.2. Ausschluss von Prozessen

Bei verschiedenen Virens Scannern können auch Prozesse ausgeschlossen werden. Bitte erstellen Sie Ausnahmen für folgende Prozesse:

#### Auf Ihrem CHARLY-Server:

- > \NeXT\NextLibrary\System\machd.exe
- > \NeXT\NextLibrary\System\nmsserver.exe
- > \NeXT\NextLibrary\System\WindowServer.exe
- > \NeXT\NextLibrary\Frameworks\AppKit.framework\Resources\pbs.exe
- > \Solutio.app\solutio.exe
- > \Primebase\dssv.exe
- > \Primebase\pbds.exe

#### Auf jedem CHARLY-Client:

- > \NeXT\NextLibrary\System\machd.exe
- > \NeXT\NextLibrary\System\nmsserver.exe
- > \NeXT\NextLibrary\System\WindowServer.exe
- > \NeXT\NextLibrary\Frameworks\AppKit.framework\Resources\pbs.exe
- > \Solutio.app\solutio.exe

